






Stahování dat z pumpy MiniMed 780G

program Carelink

POSTUP ZÍSKÁNÍ DAT

- 1) Přihlašte se na internetové stránky <https://carelink.minimed.eu>
- 2) V pravém horním rohu klikněte na **Předvolby** (viz obr. 1)
- 3) **Ujistěte se, že máte nastavené cílové rozmezí glukózy (Nízký/Vysoký) 3,9-10 mmol/l.** Pro uložení klikněte v pravém horním rohu na **Aktualizovat**. **Bez tohoto správného nastavení nelze exportovaná data hodnotit!** (viz obr. 2)
- 4) Klikněte vlevo na **Zprávy** a vyberte časové období: **posledních 14 dní** (viz obr. 3)
- 5) Označte zakliknutím následující **zprávy** (viz obrázek 4):
 - **Hodnocení a průběh** (pro porovnání zvolte interval předchozích 14 dnů)
 - **Denní přehled** (označte zakliknutím posledních 14 dní)
 - **Týdenní přehled**
 - **Dodržování léčby**
 - **Nastavení zařízení**
- 6) Nahoře klikněte na **Vytvářet zprávy** (viz obrázek 5)
- 7) Zprávu uložte jako PDF

- Máte-li pumpu propojenou s mobilní aplikací MiniMed Mobile, data se do Carelinku stahují automaticky.
- Nemáte-li pumpu propojenou s mobilní aplikací, potřebujete ke stažení modré USB. Informujte se o jeho dostupnosti u distributora pumpy.
- Chcete-li Váš osobní Carelink propojit s Carelinkem kliniky IKEM, připravte si Vaše přihlašovací jméno + heslo a domluvte se s edukační sestrou (ambulance, dveře č. 18). Propojení neslouží jako náhrada zaslání PDF, ale v individuálních případech umožňuje podrobnější analýzu dat.

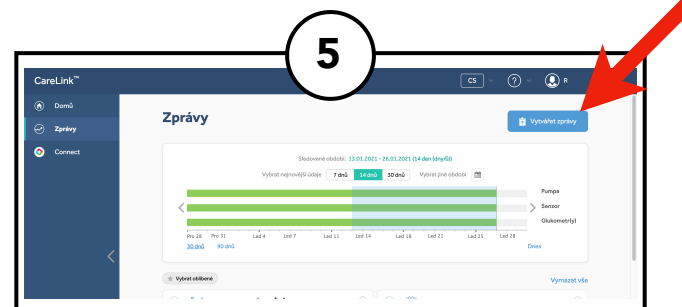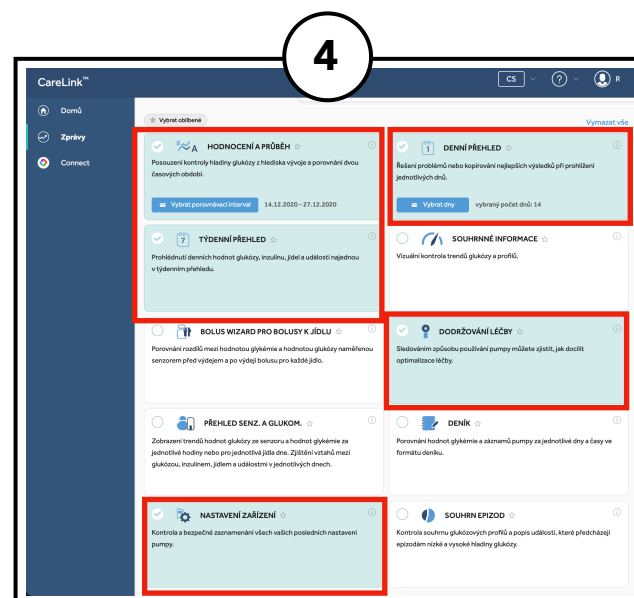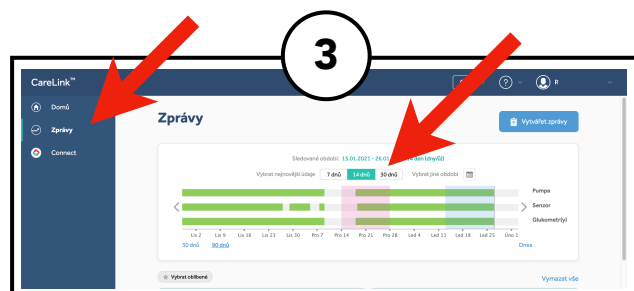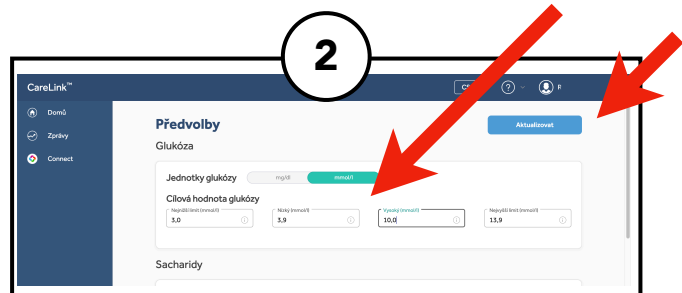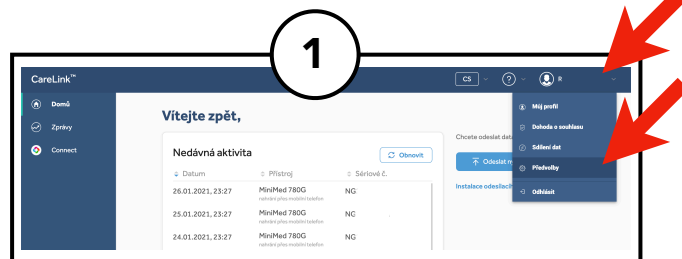

Odeslání stažených dat do IKEM:

- Soubor odešlete na e-mail: diadata@ikem.cz
- Formát souboru: **PDF**
- Velikost souboru: **max 10 MB**
(Pokud je soubor větší, rozdělte na 2 soubory ve 2 e-mailech. Zvažte také, zda je nutné posílat všechny stránky v PDF souboru.)
- E-mail nazvěte: **Stažená data**
- E-mail pošlete z adresy, kterou máte zapsanou v IKEM jako kontaktní
- Do textu e-mailu napište Vaše kontaktní údaje: **jméno + příjmení**
rok narození